

YOUNG WOUND DRESSING

영운드드레싱

Băng gạc vô trùng

Young Wound Dressing




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chất liệu vải không dệt PET (Elastic Non-woven fabric), sợi không đan dệt, dày $0.47 \pm 0.05\text{mm}$, độ bền kéo khi đứt MD > 8.5kg/50mm, độ bền kéo khi đứt CD > 4.5kg/50mm, độ giãn dài MD < 60%, độ giãn dài CD < 120%, co giãn và mềm mại, thoáng khí, băng 4 góc bo tròn.
- Gạc thấm hút dịch tốt, phủ lớp màng lưới polyethylene (HDPE) ngăn không cho gạc dính vết thương, thay băng không đau.
- Phủ keo Acrylic 50g/m², an toàn cho mọi loại da, độ dính 580g/12mm ± 30g. Lực dính 4,5-5N/cm.
- Giấy lót silicone bảo vệ keo, định lượng 80g/m², dày 0.07mm ± 10%, lực bóc 5-20gf/25mm, dễ dàng bóc ra khi sử dụng.
- Tiệt trùng E.O Gas và đóng gói riêng từng miếng.
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, CFS, TCCS 25:2019/YC

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng bảo vệ các vết thương tiết dịch ít hoặc dùng cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim lùn,...

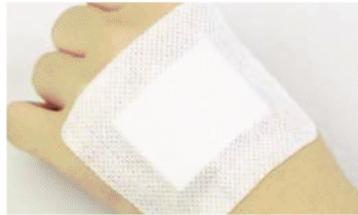

CÁCH SỬ DỤNG

- ✓ Làm sạch và khô vết thương, vùng cần cố định trước khi dán sản phẩm.
- ✓ Tháo bỏ bao bì và lớp giấy bảo vệ keo của băng, dán trực tiếp lên vị trí cần dán.
- ✓ Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.

Mã	Kích thước băng	Kích thước gạc	Quy cách
VW6070	≥ 6cm x 7cm	≥ 3cm x 4cm	
VW6010	≥ 6cm x 10cm	≥ 3cm x 5cm	
VW9010	≥ 9cm x 10cm	≥ 5cm x 6cm	
VW9015	≥ 9cm x 15cm	≥ 5cm x 10cm	50 miếng/ hộp
VW9020	≥ 9cm x 20cm	≥ 5cm x 15cm	
VW9025	≥ 9cm x 25cm	≥ 5cm x 20cm	
VW9030	≥ 9cm x 30cm	≥ 5cm x 25cm	